



REUSABLE, HORMONE-FREE CONTRACEPTION



Advantages

- Latex-free barrier contraceptive device that prevents sperm from entering the cervix
- Can be applied from 15 minutes up to 40 hours before intercourse
- Easy to use, effective, hormone-free
- Proven in clinical trials to be over 92% effective
- Remains in place for multiple uses within a 48 hour period
- Made of soft, medical grade silicone
- Safe, no side effects
- Reusable for one year
- Does not interfere with the sexual desire or the pleasure of either partner

How to use the FemCap

1. Put spermicide in both sides of the FemCap.




2. Fold the FemCap and insert it in your vagina.



3. Push the FemCap as far as possible to place the large border behind the cervix.



4. After intercourse, wait at least 6 hours before removing the FemCap. To remove it, grab the handle and gently pull out.

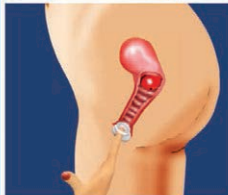

| Small 22mm | Medium 26mm | Large 30mm |  |
|--|---|--|---|
|  Never been pregnant |  Pregnant, Miscarriage, C-section |  Delivered vaginally | |

Three sizes

Frequently Asked Questions

Can the FemCap get dislodged during sex?

No. The FemCap is specifically designed to prevent it from being dislodged during intercourse. To accommodate different sexual positions, the FemCap is designed to rotate.

How to clean the FemCap?

The FemCap should be washed with anti-bacterial hand soap and rinsed with tap water after each use.

When to replace the FemCap?

It is recommended that the FemCap be replaced every year.

Can the FemCap be used during menstruation?

No, as it would impede the natural flow of menstrual fluid.

What about spermicide irritation?

It is true that spermicide can cause irritation when used very frequently and in very high doses; to minimize this, the FemCap is designed with a unique groove which stores the bulk of the spermicide in it and this helps to minimize the possibility of irritation.

FemCap Canada division of



MEDISAFE DISTRIBUTION INC.

7 – 11771 Horseshoe Way, Richmond, BC V7A 4V4 Canada

Ph: 604-232-2442 Email: sales@femcapcanada.ca

Order now: 1-855-246-2442 www.femcapcanada.ca



CONTRACEPTION RÉUTILISABLE ET SANS HORMONE



Avantages du FemCap

- Dispositif barrière de contraception sans latex
- Conçu pour couvrir le col de l'utérus et empêcher le passage du sperme
- Peut être inséré de 15 minutes à 40 heures avant une relation sexuelle
- Facile à utiliser, efficace et sans hormone
- Taux d'efficacité clinique supérieur à 92%
- Peut être en place pour une utilisation multiple jusqu'à 48 heures
- Fabriqué en silicone souple de qualité médicale
- Sans risque pour la santé, sans effet secondaire
- Réutilisable pendant un an
- N'interrompt pas le désir et ne réduit pas le plaisir sexuel des partenaires

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Petit 22mm | Moyen 26mm | Grand 30mm | <p>Le FemCap</p> |
| | | | |
| Aucune grossesse | Grossesse, fausse-couche, césarienne | Accouchement vaginal | |

Trois Tailles

Comment utiliser le FemCap

1. Mettez du spermicide sur les deux côtés du FemCap.




2. Pliez le FemCap et insérez-le dans votre vagin.



3. Poussez le profondément pour placer le côté large derrière le col.



4. Après le rapport, attendez au moins six heures avant de retirer le FemCap. Pour l'enlever, attrapez la poignée et tirez le FemCap.

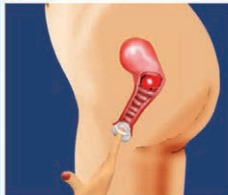

Foire aux Questions

Le FemCap peut-il se déloger durant un rapport?

Non, le FemCap est spécialement conçu pour éviter de se déloger durant un rapport. Pour permettre différentes positions, le FemCap est conçu pour tourner.

Comment nettoyer le FemCap?

Le FemCap doit être lavé avec du savon anti-bactériel et rincé à l'eau du robinet après chaque utilisation.

Quand faut-il remplacer le FemCap?

Il est recommandé de le remplacer tous les ans.

Le FemCap peut-il être utilisé durant les menstruations?

Non, cela empêcherait l'écoulement naturel du fluide.

Qu'en est-il des irritations dues au spermicide?

Il est vrai que le spermicide peut causer des irritations s'il est utilisé très souvent à fortes doses. Pour minimiser cela, le FemCap est conçu avec une fente unique qui stocke le surplus de spermicide et réduit les irritations.

FemCap Canada division de



MEDISAFE DISTRIBUTION INC.

7 – 11771 Horseshoe Way, Richmond, BC V7A 4V4 Canada
Tel: 604-232-2442 Email: j.lheureux@medisafecanada.com

Sans Frais: 1-855-246-2442 www.femcapcanada.ca